



CONFIANÇA É A

base

DO
SUCESSO.



5700 | É FUNDAMENTAL

**DURABILIDADE, CONFORTO
E TECNOLOGIA INTELIGENTE
PARA VOCÊ CRESCER.**

Uma carreira de sucesso é construída a partir de uma base sólida.

E só a D700 te dá as ferramentas fundamentais para você ter uma rotina eficiente e ao mesmo tempo focar no seu desenvolvimento profissional a longo prazo.

Desenvolvidos por profissionais com décadas de experiência em tecnologia odontológica, nossos produtos ficam com você desde o primeiro consultório até o tão sonhado upgrade.



D700 AIR

Atenda com muito mais segurança e menos esforço. Quem busca resistência e precisão encontra na D700 Air.

D700

Braço fixo na coluna, permite ao profissional melhor adaptação e ergonomia.



D700 CART

Mais estabilidade para os seus atendimentos. A D700 vem com equipo acoplado a um pedestal montado sobre 4 rodízios.



STANDARD

STANDARD FIT

CORES PARA ESTOFAMENTOS



ANGRA MARINHO CELESTE OURO GRIS

CONSULTÓRIO D700 COMPOSTO POR:

CADEIRA: ANVISA - 10069210062 EQUIPO: ANVISA - 10069210075
 UNIDADE DE ÁGUA: ANVISA - 10069210063 REFLETOR: ANVISA - 10069210069

KIT ACADÊMICO

Completo, prático, acessível e fundamental para o seu crescimento.



FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT COLOR



- Display digital;
- Bateria inteligente;
- Potência: 1.200 mWcm²;
- 3 modos programáveis de aplicação;
- Condutor de luz de fibra óptica;
- Tempo de fotoativação: 5, 10, 15 e 20 segundos com display digital;
- Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos;
- Acompanha base de descanso;
- Protetor ocular giratório de fácil manuseio e posicionamento.

3 MODOS DE APLICAÇÃO

- Contínuo: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização;
- Rampa: aumento gradual da intensidade da luz;
- Pulsado: acionamento pulsátil com ciclos de 1x1 segundo.

DESTILADORA BIOAQUA



- Capacidade do reservatório de 4 litros;
- Cuba interna em aço inox;
- Velocidade de destilação de 1 litro por hora;
- Botão de acionamento com desligamento automático;
- Parte superior desmontável, vedação entre as partes com anel de silicone;
- Compacta: formato cilíndrico e de fácil transporte.

AUTOCLAVE 12 L E 21 L

- Tempo de esterilização pré-programado;
- Câmara de esterilização em aço inox;
- Secagem com a porta entreaberta;
- Vedação da porta em silicone de alta performance;
- Comandos manuais simples e precisos;
- 18 sistemas de segurança;
- 3 bandejas internas (21L);
- 2 bandejas internas (12L);
- Bivolt.



	12 L	21 L
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E FREQUÊNCIA	127V~ (100-140V~) 220V~ (198-264V~)	127V~ (100-140V~) 220V~ (198-264V~)
DIÂMETRO DA CÂMARA (MM)	214 mm	240 mm
PROFUNDIDADE DA CÂMARA (MM)	318 mm	450 mm
PESO	26 Kg	33 Kg


LAVADORA ULTRASSÔNICA BIOFREE 2 L E 6 L

- Visor LED digital do tempo de funcionamento e temperatura da água;
- Seletor para ajuste do tempo do ciclo de lavagem, com água aquecida;
- Iluminação LED interna da cuba;
- Geradores ultrassônicos de vibração: ondas uniformemente distribuídas, que proporcionam uma limpeza mais profunda alcançando áreas inacessíveis à lavagem manual;
- Aquecedores de cerâmica: garantem maior segurança, eficiência e aumentam a vida útil do equipamento;
- Válvula de drenagem: facilita o esvaziamento da água da lavadora (6 litros);
- Função de desgaseificação: relacionada à remoção de gotículas e bolhas de ar nas paredes do tanque, melhorando a eficiência da limpeza.



SELADORA BIOPACK

- Suporte para papel grau cirúrgico com espaçamento regulável;
- Regulagem de temperatura - permite ajuste para uma selagem segura e rápida;
- Cortador de papel tipo trilho: corta em ambos os sentidos;
- Corpo em aço inox;
- Resistência isolada: inibe o risco de queima do papel;
- Fechamento mediante alavanca manual com trava;
- Chave on/off com indicador luminoso;
- Chapa de apoio frontal desmontável: produto compacto e de fácil transporte;
- Espessura de selagem de 10mm.

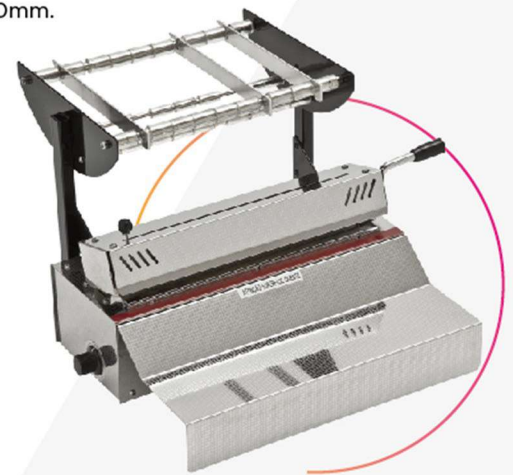

BOMBA DE VÁCUO

Equipamento de sucção de alta potência, que absorve com eficiência a saliva e resíduos diversos. Disponível nas versões com 1HP (até 4 consultórios) e 1/2 HP (até 2 consultórios)

- Bivolt;
- Partes internas em bronze, maior durabilidade;
- Pode ser instalada em todos os tipos de consultórios;
- Abafador de série.



1/2HP



1HP

	1/2 HP	1 HP
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E FREQUÊNCIA	110 - 127 / 220V~ (Bivolt - Chave Seletora)	110 - 127 / 220V~ (Bivolt - Chave Seletora)
VÁCUO MÁXIMO	400 mm/Hg	550 mm/Hg
CONSUMO DE ÁGUA	0,400 l/min	0,400 l/min
PESO	22 Kg	33,43 Kg

ENDUS

LOCALIZADOR APICAL. PRECISÃO DESDE A RAIZ.

- Compacto, leve e de fácil uso;
- Totalmente automático sem ajustes manuais ou calibração;
- Mensurações altamente sensíveis com medidas a cada 0,1mm;
- Sem fios, com funcionamento através de pilhas AAA de 1.5V.




ENDUS DUO R

MICROMOTOR + LOCALIZADOR APICAL.

- 4 modos de programação, com movimentação recíproca e rotatório convencional além da função localizador apical;
- Reverso automático por torque e redução de velocidade por torque;
- Bateria recarregável de alta capacidade Li-ion;
- Variação de velocidade de rotação do micromotor 125-625rpm;
- Variação de torque 0.3-4.0 N.cm.



COM MOVIMENTO RECÍPROCANTE

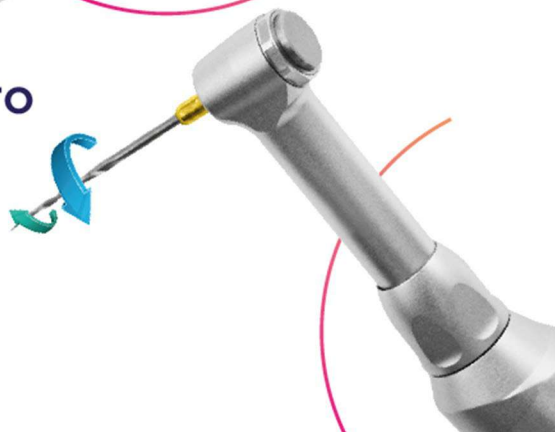

ULTRASSOM JET

- Bomba peristáltica;
- Chave seletora de potência (7 posições);
- Reservatório de líquido irrigante;
- Sistema de capas autoclaváveis aumenta a vida útil das peças de mão.
- Acompanha 3 tips:
 - 02 Perio Sub;
 - 01 Perio Supra.



- Pequeno e portátil;
- 02 capas autoclaváveis;
- Acompanha 3 tips:
 - 02 Perio Sub;
 - 01 Perio Supra.

JET HAND

- Recipiente de bicarbonato de fácil acesso acoplado à peça de mão;
- Ponta do jato de bicarbonato autoclavável;
- Tampa transparente, posicionada na parte superior do corpo da caneta;
- Efetua mistura de ar + água + bicarbonato a uma pequena distância da ponta, evitando entupimentos nos condutos do produto.



RAIOS X D700 MAX

- Base em U (coluna móvel): Melhor mobilidade;
- 21 intervalor de tempo de exposição;
- Movimentação suave, precisa e de fácil manuseio;
- Pronto para o Sistema Digital.



**QUANDO
CUSTO-BENEFÍCIO
E EFICIÊNCIA
SE ENCONTRAM**

**COMPRESSOR
DE AR D700**

- Protetor térmico contra sobreaquecimento e filtro de saída de ar;
- Motor isento de óleo;
- Baixo nível de ruído;
- Disponíveis nas versões 40 L, 65 L e 150 L.



	40 L	65 L	150 L
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E FREQUÊNCIA	220V-±10% / 60Hz ou 127V-±10% / 60Hz	220V-±10% / 60Hz ou 127V-±10% / 60Hz	220V-±10% / 60Hz
PRODUTO (LxCxA)	498 x 448 x 801 mm	498 x 498 x 971 mm	497 x 1066 x 936 mm
PESO COM EMBALAGEM	48 Kg	54 Kg	107 Kg

D700 | É FUNDAMENTAL

D700.COM.BR